

# GELCIDE

ESSENTIAL



Αποτελεσματική  
προστασία και θεραπεία  
της βλεννογονίτιδας και  
της περιεμφυτευματίτιδας  
με φυσικό τρόπο, χωρίς  
παρενέργειες.



## Το GELCIDE ESSENTIAL, έτοιμο προς χρήση, σφραγίζει τους περιοδοντικούς θύλακες και προστατεύει από τον επαναποικισμό έως και 25 ημέρες!

### Θεραπευτικές ενδείξεις

- Θεραπεία της βλεννογονίτιδας και της περιεμφυτευματίτιδας, προλαμβάνοντας την πιθανή εξέλιξη σε σοβαρότερες μορφές της νόσου.
- Προστασία των χειρουργικών ραμμάτων και των εκτεθειμένων πληγών.
- Υποστήριξη για περιοδοντική συντήρηση.
- Ανάρρωση μετά από εξαγωγή δοντιών.

### Χαρακτηριστικά

- Έτοιμο προς χρήση διάλυμα. Εύκολο στην εφαρμογή, ήπιο και ανθεκτικό.
- Μόλις εφαρμοστεί, το υγρό μετατρέπεται σε τζελ που σφραγίζει τον περιοδοντικό θύλακα σε δευτερόλεπτα.
- Η δράση διατηρείται έως και 25 ημέρες, χάρη στον μηχανισμό σταδιακής απελευθέρωσης.
- Χωρίς παρενέργειες.
- Σημαντική βελτίωση συχνά μέσα σε 24 ώρες με διαρκές αίσθημα φρεσκάδας
- Αρκεί η εφαρμογή μία ή δύο φορές το χρόνο για συντήρηση.

### Σύνθεση

- 23 αιθέρια έλαια όπως: θυμάρι, δέντρο τσαγιού, μυρτιά, καμφορά και άλλα.
- Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προσκολλάται στον βλεννογόνο ως μεμβράνη.
- Χωρίς αντιβιοτικά / έτοιμο προς χρήση διάλυμα.

### Συσκευασία:

1,5 ml διαλύματος αρκεί για περίπου 12-20 εφαρμογές

### Πρωτόκολλο εφαρμογής

Εφαρμόστε το GELCIDE ESSENTIAL απευθείας από τη σύριγγα στους καθαρισμένους περιοδοντικούς θύλακες, μετά την περιοδοντική απόξεση.


Το υγρό διεισδύει τέλεια σε όλες τις πτυχές, πήζει σε λίγα δευτερόλεπτα, σχηματίζοντας μια μεμβράνη που προσκολλάται στον βλεννογόνο και τον περιοδοντικό θύλακα.

Η μεμβράνη που σχηματίζεται σφραγίζει την πληγείσα περιοχή, εμποδίζοντας την είσοδο βακτηρίων και διαλύεται σε περίπου 12 έως 25 ημέρες, επιτρέποντας στο σφραγισμένο θύλακα να επουλωθεί προστατευμένος.




### Ημέρα 1:

Λόγω της εφαρμογής του σε υγρή μορφή απευθείας στην πληγείσα περιοχή, το GELCIDE ESSENTIAL είναι ιδανικό για την πρόληψη της βλάβης του περιβάλλοντος οστού. Η μοναδική του σύνθεση του επιτρέπει να διεισδύει γρήγορα στον περιοδοντικό θύλακα, αποκτώντας στη συνέχεια μια ζελατινώδη υφή στο εσωτερικό και σχηματίζοντας στην επιφάνεια μια ανθεκτική εξωτερική μεμβράνη που "σφραγίζει" την πληγή.

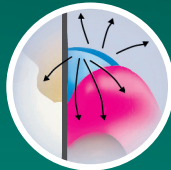

### Ημέρες 10-12:

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύνθεση του GELCIDE ESSENTIAL απελευθερώνεται σταδιακά, σε αποτελεσματικές συγκεντρώσεις, έως και 25 ημέρες. Η μεμβράνη που σχηματίζεται είναι διαπερατή, αλλά αδιάλυτη σε υγρά, προστατεύοντας έτσι τον περιοδοντικό θύλακα από ερεθισμούς και λοιμώξεις.

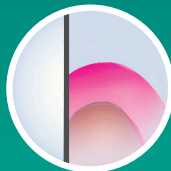

### Ημέρες 12-25:

Μετά από 25 ημέρες, το τζελ έχει διαλυθεί πλήρως και η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, εξαλείφοντας την ανάγκη αφαίρεσης του τζελ ή άλλης επίσκεψης, με τον θύλακα να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

## GELCIDE ESSENTIALS ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ

Πριν



Αφαίρεση με ελάχιστο  
τραυματισμό



Πλήρωση μετεξακτικού  
φατνίου με μόσχευμα

Κλείσιμο κρημνού  
με μεμβράνη



Κάλυψη με Gelcide  
Essential

24 ώρες μετά  
το χειρουργείο



Η επικάλυψη  
με Gelcide Essentials  
παραμένει άθικτη

6 μήνες μετά

