




Wax Disc

---

Digital wax-up.  
Press & cast.

Digital wax-up.  
Press & cast.

# Wax Disc

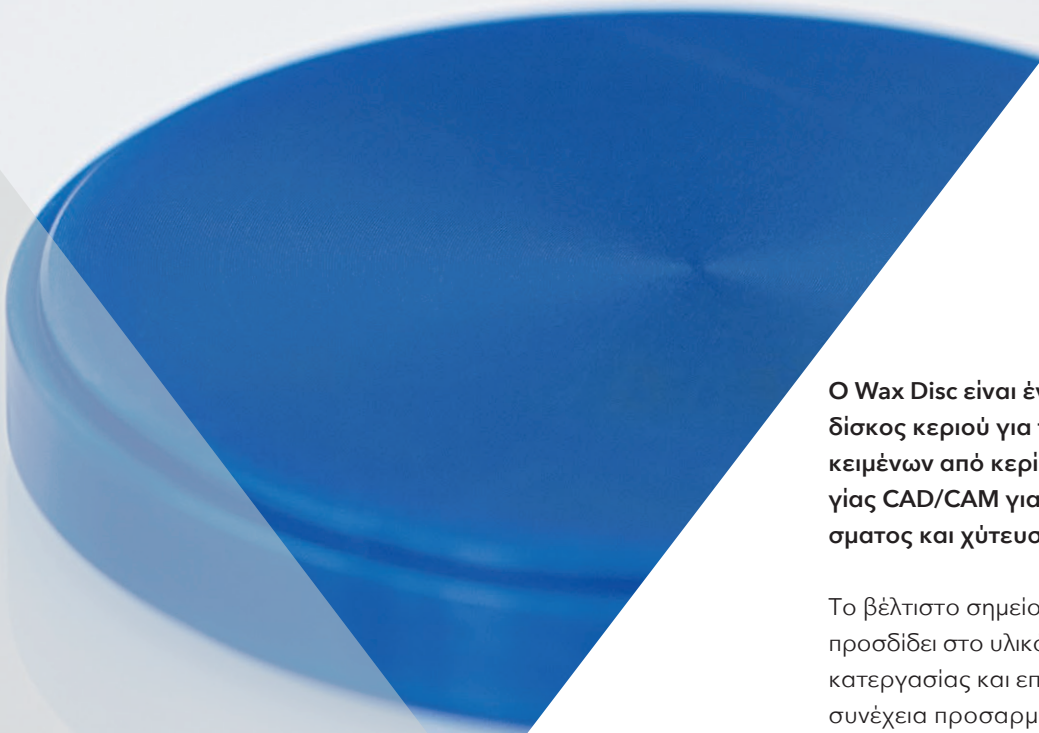

Ο Wax Disc είναι ένας συνθετικός δίσκος κεριού για την κατασκευή αντικειμένων από κεριά με χρήση τεχνολογίας CAD/CAM για τις τεχνικές πρεσαρίσματος και χύτευσης.

Το βέλτιστο σημείο τήξης 100-120°C προσδίδει στο υλικό εξαιρετικές ιδιότητες κατεργασίας και επιτρέπει να γίνουν στη συνέχεια προσαρμογές ή προσθήκες με το χέρι. Οι αποκαταστάσεις που προκύπτουν από κοπή παρουσιάζουν πολύ καλή σταθερότητα σχήματος, ποιότητα επιφανείας και ακρίβεια εφαρμογής και καίγονται χωρίς να αφήνουν υπολείμματα κατά τη διαδικασία της προθέρμανσης. Τα αποτελέσματα είναι λεία, έχουν ακρίβεια στην εφαρμογή, τόσο τα χυτά όσο και τα πρεσαριστά αντικείμενα.

## Τεχνικά δεδομένα



Υλικό  
Συνθετικό κεριά



Συμπεριφορά  
στην κοπή  
Εξαιρετική



Εξάχνωση  
Χωρίς  
υπολείμματα




Κατάλληλο για  
Τεχνολογία  
πρεσαρίσματος και  
χύτευσης



Σημείο τήξης  
100 - 120 °C

**1** Καλές ιδιότητες μηχανικής κατεργασίας και σταθερότητα σχήματος  
Πολύ καλή ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια προσαρμογής

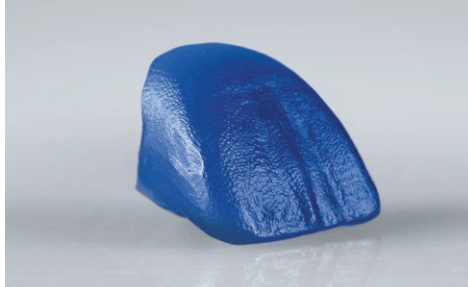

Εξαιρετική ποιότητα επιφάνειας



Εξαιρετική συμπεριφορά στην κοπή

**2** Καίγεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά τη διαδικασία της προθέρμανσης  
Προκύπτουν λεία πρεσαριστά και χυτά αντικείμενα που προσαρμόζονται με ακρίβεια




Εξάχνωση χωρίς υπολείμματα



Προκύπτουν λεία πρεσαριστά και χυτά αντικείμενα που προσαρμόζονται με ακρίβεια



**3** Βέλτιστο σημείο τήξης  
Μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων διορθώσεις και προσθήκες

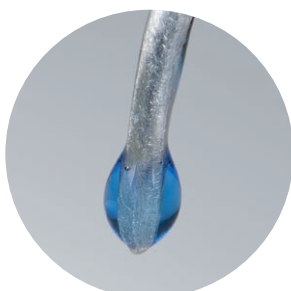

Σημείο τήξης 100 - 120 °C



Μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων διορθώσεις και προσθήκες



## Μορφές παράδοσης

Γεωμετρίες  
W-98, Z-95

Πάχη  
10, 14, 16, 20, 25 mm

Χρώματα  
Μπλε



## Άλλα κορυφαία προϊόντα



### NexxZr Tool U

Υψηλής απόδοσης οδοντιατρικά κοπτικά εργαλεία από άριστης ποιότητας καρβίδιο με εξαιρετικά αιχμηρό κοπτικό άκρο



### NexxZr T Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με πολυλειτουργική αισθητική και ευρύ φάσμα ενδείξεων



### NexxZr+ Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με φυσική αισθητική



### PMMA Disc Multi

Πολυμεθυλο-μεθακρυλικό διασταυρούμενων χημικών δεσμών με ενσωματωμένη διαβάθμιση απόχρωσης για προσωρινές αποκαταστάσεις μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής (CAD/CAM)

**Sales & Technical Support EMEA**  
EC Representative AB Ardent  
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden  
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com  
sagemax.com