

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Θεραπεία περιοδοντικών θυλάκων (μείωση του βάθους του θυλάκου, μείωση της αιμορραγίας κατά την ανίχνευση, αύξηση κλινικής πρόσφυσης)
2. Προστασία διαρρηγμένου στοματικού βλενογόνου, όπως μικρά τραυματικά έλκη, κρημνοί στοματικού βλενογόνου, μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και μετά την πραγματοποίηση εξαγωγών

### ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΗ

- 1) Αναρροφήστε όλο το διάλυμα χρησιμοποιώντας τη σύριγγα με βελόνα



- 2) Προβείτε σε έγχυση του διαλύματος στη φιάλη με την σκόνη




- 3) Ανακινήστε τη φιάλη μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη



- 4) Πάρτε μια κατάλληλη ποσότητα διαλύματος για τη χρήση



- 5) Αντικαταστήστε τη βελόνα της σύριγγας με την αμβλεία βελόνα για να εφαρμόσετε το διάλυμα

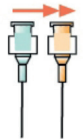

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### Για περιοδοντικούς θυλάκους:

1. Για να εφαρμόσετε το διάλυμα, λυγίστε την αμβλεία βελόνα για να μιμηθείτε έναν περιοδοντικό ανιχνευτήρα και, στη συνέχεια, ανιχνεύστε το θύλακα με τρόπο παρόμοιο με τον περιοδοντικό έλεγχο.
2. Τοποθετήστε το άκρο της βελόνας κοντά στη βάση του θυλάκου και προβείτε σε έγχυση του Gelcide έως ότου το διάλυμα φτάσει στο άνω περιθώριο των ούλων.
3. Βγάλτε τη βελόνα από τον θύλακα

#### Για άλλες ενδείξεις

1. Εφαρμόστε το διάλυμα πάνω από τομές, τραυματισμούς ή ράμματα του βλενογόνου της στοματικής κοιλότητας που πρέπει να προστατευθούν, αφού στεγνώσουν.
2. Κατευθύνετε με ακρίβεια, απαλά την αεροσύριγγα στο τοποθετημένο διάλυμα για να επιταχύνετε την εξάτμιση του οίνοπνεύματος και να διευκολύνετε την προσκόλληση του φιλμ στο σημείο εφαρμογής.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η χρήση του GELCIDE αντενδείκνυται σε ασθενείς με αλλεργία στις πενικιλίνες και τις κεφαλοσπορίνες (ca. 1% of pop.)