




ariston dental
better answers

AutoScan-DS-EX Pro(H)

Καλωσορίστε τη νέα εποχή των 5.0 MP

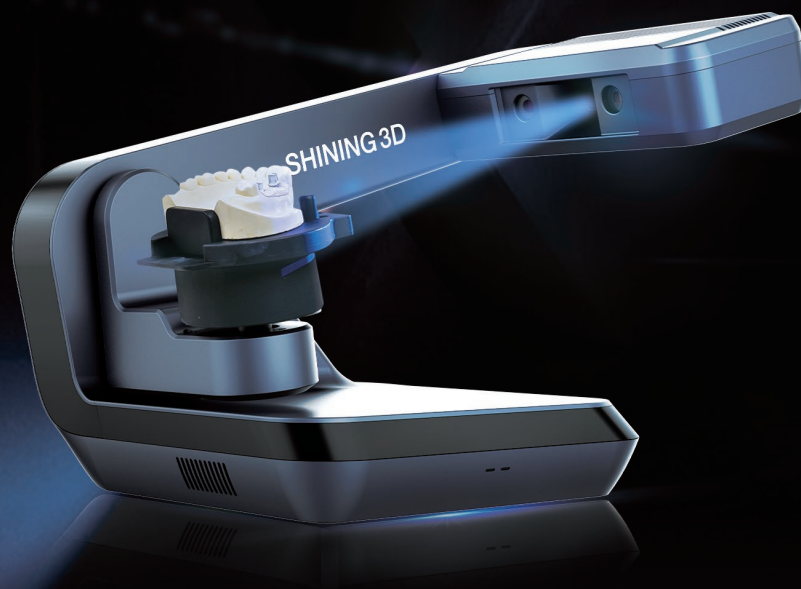

Γνωρίστε τον AutoScan-DS-EX Pro(H)ο(H)

Το AutoScan-DS-EX Pro(H), σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την SHINING 3D, είναι ένας τρισδιάστατος οδοντιατρικός σαρωτής με ισχυρές δυνατότητες για πολλαπλές εφαρμογές, καλύπτοντας σάρωση αποτυπωμάτων, εκμαγείων γύψου, αρθρωτήρων, κολοβωμάτων εμφυτευμάτων και άλλων.

Οι κάμερες υψηλής ανάλυσης, οι προηγμένοι αλγόριθμοι και η φιλική προς τον χρήστη διεπαφή προσφέρουν ανώτερη ποιότητα δεδομένων και βέλτιστη εμπειρία χρήσης.



SHINING 3D

Advanced Desktop Scanner



Υπερ-υψηλή Ακρίβεια

Ακρίβεια σάρωσης $\leq 8 \mu\text{m}$, που εξασφαλίζει αξιόπιστα αποτελέσματα σάρωσης, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις διαφόρων εφαρμογών στον οδοντιατρικό κλάδο.



Ασυναγώνιστη Λεπτομέρεια

Εξοπλισμένος με διπλές κάμερες υψηλής ανάλυσης 5,0 MP, ο AutoScan-DS-EX Pro(H) αποτυπώνει με ακρίβεια και σχολαστικότητα κάθε λεπτομέρεια των αντικειμένων.



Ταχύτητα Σάρωσης

Bite (3 λήψεις): 6,5 δευτερόλεπτα
Άνω/Κάτω γνάθος (10 λήψεις): 14 δευτ.
1–4 εκμαγεία (18 λήψεις): 21,5 δευτ.
5–8 εκμαγεία (22 λήψεις): 25,5 δευτ.
Αποτύπωμα (28 λήψεις): 31 δευτ.

Ισχυρό Λογισμικό

Ευέλικτη Ροή Εργασίας

Ρυθμίστε τη δική σας ροή εργασίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα όπως ποτέ άλλοτε. Διατίθενται επιλογές all-in-one και triple tray για την απόκτηση πλήρων δεδομένων σάρωσης με λιγότερα βήματα.

Επεξεργασία Δεδομένων στο Παρασκήνιο

Η σάρωση και η επεξεργασία δεδομένων στο παρασκήνιο μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα, καθιστώντας τη συνολική διαδικασία πιο αποδοτική.

Ευέλικτες Λειτουργίες Σάρωσης


Το νέο λογισμικό που συνοδεύει το AutoScan-DS-EX Pro(H) υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες σάρωσης, όπως Multi Path Scan, High Quality Scan, AI Scan, Texture Scan, HDR Mode Scan και Reduce High Brightness Scan κ.ά.




Εφαρμογές



Κολοβώματα Εμφυτευμάτων

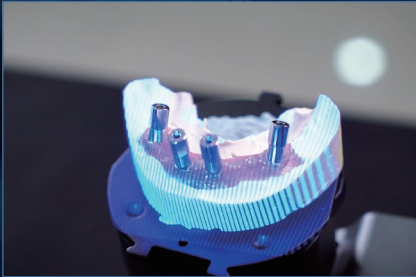

Εμφυτευματικές Γέφυρες

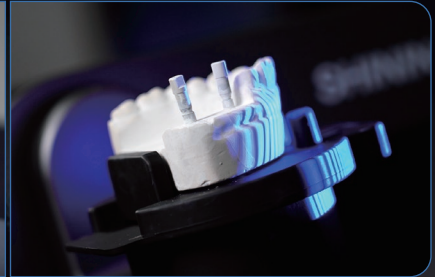

Scanbody



Υφή



Μοντέλο



Αρθρωτήρας



Ολική Οδοντοστοιχία



Αποτύπωμα



Άξονας & Κολοβό Στήριγμα

Technical Specifications

Μοντέλο	AutoScan-DS-EX Pro(H)
Ανάλυση Κάμερας	2*5.0 MP
Ακρίβεια	≤ 8 µm
Σάρωση	Bite(3shot) 6.5s, Upper/Lower(10 shot) 14s, 1~4 Dies(18shot) 21.5s, 5~8 Dies(22shot) 25.5s, Impression(28shot) 31s
Σάρωση Αρθρωτήρα	Support articulator transfer
Μορφή Εξαγωγής	STL, PLY, OBJ
Πηγή Φωτός	Blue Light
Διάσταση	260x270x420 mm
Βάρος	5.0 Kg
Interface	USB 3.0
Τροφοδοσία Ρεύματος	DC 24V

*Notice: SHINING 3D reserves the right to introduce modifications or alterations to any of the specifications and images used in this document.



ariston dental
better answers